



Program „ENERGIA” 😊

Program „**Energia**” służy do zrównoważenia energii w ludzkim organizmie, przywracając jej ruch w kanałach energetycznych i meridianach, utrzymując jego wydajność w czasie stresu. W czasie zwiększonych obciążeń ciała fizycznego, program „**Energia**”, zwiększa zdolności adaptacyjne ciała ludzkiego i poprawia jego samopoczucie 😊

Program „**Energia**” urządzenia Biotrem SB umożliwia wykonanie masażu energetycznego całego ciała ludzkiego, a poprzez to rozprowadzić tę energię po całym ciele człowieka. Masaż energetyczny, to zestaw specjalnych działań, które umożliwiają przywrócenie i zharmonizowanie przepływu energii w organizmie człowieka wg tzw. ustawień kanałowo - energetycznych, czyli wzorcowych parametrów ludzkich meridianów. Poprzez te działania eliminujemy nadmiar energii w jednym miejscu i przenosimy ją do miejsc, gdzie pojawiły się zaburzenia fizyczne 😊

Każde ciało, oprócz fizycznej powłoki, posiada również odpowiednie drgania, częstotliwości, wibracje. Stan pola energetycznego zależy od stanu ludzkiej aury. Jej pole powstaje w wyniku pracy energii poprzez receptory, zwane również czakrami. Każda czakra jest powiązana z określonym narządem wewnętrznym organizmu człowieka. Kiedy nie ma wystarczającej ilości energii lub jest jej nadmiar powstaje ognisko zapalne w ciele ludzkim, dolegliwość lub choroba. Uruchomienie przepływu energii przez te kanały może zostać zakłócona z powodu blokady kanałów energetycznych. Kiedy jeden z meridianów jest zablokowany, energia zatrzymuje się, a następnie płynie do innych kanałów, do jednych w mniejszym stopniu, do innych w większym. W ten sposób, w niektórych meridianach tworzy się nadmiar energii, a w niektórych jej brak. Obie sytuacje mają taki sam negatywny wpływ na pracę ludzkiego organizmu. Naruszenie harmonii przepływu energii w ludzkim ciele prowadzi do zablokowania poszczególnych czakr 😊

Do przywracania pracy wszystkich czakr i wzmocnienia energii człowieka służy właśnie masaż energetyczny. Masaż energetyczny jest trwalszy i delikatniejszy niż masaż klasyczny. Oddziaływanie na tkanki następuje z powodu elektromagnetycznego impulsu o bardzo małej mocy. Podczas takiej sesji energetycznej, energia trafia do każdej komórki człowieka, do każdego jego narządu, aby odnowić i odzyskać w sobie właściwą pracę i obudzić naturalne siły człowieka 😊

Ta energia nie może być szkodliwa dla ludzkiego ciała fizycznego, ponieważ wchodzi do niego i jest wchłaniana, a jej nadmiar zostaje usunięty na zewnątrz ciała człowieka. Impulsy te przyspieszają przede wszystkim procesy metaboliczne i uruchamiają mechanizmy samoleczenia ciała fizycznego. Dla osiągnięcia bilansu (równowagi) energetycznego w organizmie konieczne jest działanie urządzeniem Biotrem SB na określone strefy i punkty. Wówczas meridiany, aktywują się i człowiek odczuwa odchodzący stan negatywnych emocji, poprawę stanu zdrowia, a z czasem oczyszczanie organizmu 😊

Rozpocznijmy teraz działania, aby przywrócić wszystkie funkcje naszego ciała fizycznego, całkowity stan jego energetycznej równowagi, inaczej homeostazy 😊

Zalecana liczba zabiegów, to 1 seria (1 seria, to 10 dni). Okres leczenia należy przeprowadzać mniej więcej co 3 - 4 miesiące, czyli po wykonaniu wszystkich serii z określoną liczbą ich powtórzeń, należy zrobić przerwę na w/w okres 😊

Początek działań dla młodzieży w przedziale wiekowym między 11 – 14 lat 😊

Proszę zwrócić dokładną uwagę na punkty działania programem „Energia” i ich kolejność 😊

Początek działań:

1 dzień: strefa 59 po lewej + strefa 63 po prawej + strefa 4 po lewej

2 dzień: strefa 59 po prawej + strefa 63 po lewej + strefa 4 po prawej



Strefa 59



Strefa 63




Strefa 4

(na zdjęciu prawa dłoń) (na zdjęciu lewe ramię) (na zdjęciu prawa noga)

Kolejne dni:

3 dzień: strefa 55 po lewej + strefa 13 po prawej + punkt VG15

4 dzień: strefa 55 po prawej + strefa 13 po lewej + punkt VG15

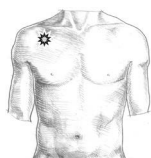

Strefa 55

(na zdjęciu prawy bark)



Strefa 13

(na zdjęciu prawa noga)



Strefa VG 15

(tył głowy)

Kolejne dni:

5 dzień: strefa 33 po lewej + strefa 3 po prawej + strefa 8 po prawej

6 dzień: strefa 33 po prawej + strefa 3 po lewej + strefa 8 po lewej




Strefa 33

(na zdjęciu prawa dłoń)



Strefa 3

(na zdjęciu prawa stopa)

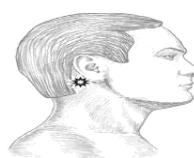

Strefa 8

(na zdjęciu prawe ucho)
przykładamy tuż pod nim

Kolejne dni:

7 dzień: strefa 50 po prawej + strefa 94 po lewej + strefa 43 po lewej

8 dzień: strefa 50 po lewej + strefa 94 po prawej + strefa 43 po prawej



Strefa 50

(na zdjęciu noga prawa)



Strefa 94

(na zdjęciu ucho prawe)



Strefa 43

(na zdjęciu noga prawa)

Kolejne dni:

Dzień 9: strefa 80 po lewej + strefa 57 po prawej

Dzień 10: strefa 80 po prawej + strefa 57 po lewo



Strefa 80

(na zdjęciu stopa prawa)



Strefa 57

(na zdjęciu dłoń prawa)

Koniec działań dla młodzieży między 11 – 14 lat 😊

Początek działań w przedziale wiekowym między 15 – 19 lat 😊

Proszę zwrócić dokładną uwagę na punkty działania programem „**Energia**” i ich kolejność 😊

Początek działań:

Dzień 1: strefa 63 po lewej + strefa 3 po prawej

Dzień 2: strefa 63 po prawej + strefa 3 po lewej



Strefa 63

(na zdjęciu ręka lewa)



Strefa 3

(na zdjęciu stopa prawa)

Kolejne dni:


Dzień 3: strefa 42 po lewej + punkt VG15

Dzień 4: strefa 42 po prawej + punkt VG15



Strefa 42

(na zdjęciu noga prawa)

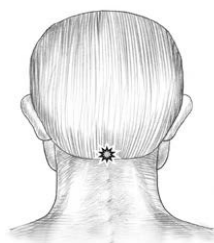

Strefa VG15

(na zdjęciu tył głowy)

Kolejne dni:

Dzień 5: strefa 94 po lewej + strefa 50 po prawej + strefa 73 po prawej

Dzień 6: strefa 94 po prawej + strefa 50 po prawej + strefa 73 po lewej




Strefa 94

(na zdjęciu prawe ucho)



Strefa 50

(na zdjęciu prawa noga)

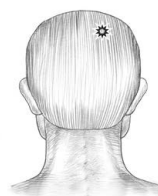

Strefa 73

(na zdjęciu prawa strona)

Kolejne dni:

Dzień 7: strefa 13 po lewej + strefa 80 po prawej + punkt VG15

Dzień 8: strefa 13 po prawej + strefa 80 po lewej + punkt VG15



Strefa 13

(na zdjęciu noga prawa)



Strefa 80

(na zdjęciu stopa prawa)



Strefa VG15

(na zdjęciu tył głowy)

Kolejne dni:

Dzień 9: strefa 4 po lewej + strefa 35 po prawej

Dzień 10: strefa 4 po prawej + strefa 35 po lewej



Strefa 4

(na zdjęciu noga prawa)



Strefa 3

(na zdjęciu ręka lewa)

Koniec działań w przedziale wiekowym między 15 - 19 lat 😊

Początek działań dla osób w 19 – 65 lat 😊

Proszę zwrócić dokładną uwagę na punkty działania programem „Energia” i ich kolejność 😊

Początek działań:

Dzień 1: strefa 57 po lewej + strefa 4 po prawej + strefa 80 po lewej

Dzień 2: strefa 57 po prawej + strefa 4 lewej + strefa 80 prawej



Strefa 57

(na zdjęciu dłoń prawa)



Strefa 4

(na zdjęciu noga prawa)



Strefa 80

(na zdjęciu stopa prawa)

Kolejne dni:

Dzień 3: strefa 33 po lewej + strefa 30 po prawej + strefa 37 po lewej

Dzień 4: strefa 33 po prawej + strefa 30 po lewej + strefa 37 po prawej



Strefa 33

(na zdjęciu prawa dłoń)



Strefa 30

(na zdjęciu prawa dłoń)



Strefa 37

(na zdjęciu prawa strona)

Kolejne dni:

Dzień 5: strefa 50 po lewej + strefa 94 po prawej + punkt VG15

Dzień 6: strefa 50 po prawej + strefa 94 po lewej + punkt VG15



Strefa 50



Strefa 94



Strefa VG15

(na zdjęciu prawa noga) (na zdjęciu prawe ucho) (na zdjęciu tył głowy)

Kolejne dni:

Dzień 7: strefa 8 po lewej + strefa 19 po lewej + strefa 73 po prawej

Dzień 8: strefa 8 po prawej + strefa 19 po prawej + strefa 73 po lewej



Strefa 8



Strefa 19



Strefa 73

(na zdjęciu prawa strona) (na zdjęciu prawa dłoń) (na zdjęciu tył głowy)

Kolejne dni:

Dzień 9: strefa 57 po lewej + strefa 3 po prawej + strefa 89

Dzień 10: strefa 57 po prawej + strefa 3 po lewej + strefa 89



Strefa 57



Strefa 3



Strefa 89

(na zdjęciu dłoń prawa) (na zdjęciu stopa prawa) (na zdjęciu tył szyi)
okolice szyi

Kolejne dni:

Dzień 11: strefa 107 po lewej + strefa 35 po prawej + strefa 42 po lewej

Dzień 12: strefa 107 po prawej + strefa 35 po lewej + strefa 42 po prawej



Strefa 107



Strefa 35



Strefa 42

(na zdjęciu dłoń prawa) (na zdjęciu ręka lewa) (na zdjęciu noga prawa)

Koniec działań dla osób między 19 - 65 lat 😊


Początek działań dla osób powyżej 65 lat 😊

Proszę zwrócić dokładną uwagę na punkty działania programem „Energia” i ich kolejność 😊

Początek działań:

Dzień 1: strefa 55 po lewej + strefa 4 po lewej + strefa 80 prawej

Dzień 2: strefa 55 po prawej + strefa 4 po prawej + strefa 80 po lewej

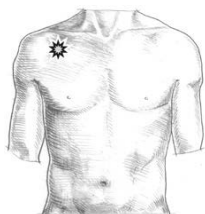

Strefa 55



Strefa 4



Strefa 80

(na zdjęciu prawy bark) (na zdjęciu prawa noga) (na zdjęciu prawa stopa)

Kolejne dni:


Dzień 3: strefa 3 po lewej + strefa 89

Dzień 4: strefa 3 po prawej + strefa 89



Strefa 3

(na zdjęciu stopa prawa)

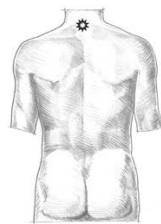

Strefa 89

(na zdjęciu tył pleców)
okolice szyi

Kolejne dni:

Dzień 5: strefa 19 po lewej + strefa 94 po prawej + strefa 50 po lewej

Dzień 6: strefa 19 po prawej + strefa 94 po lewej + strefa 50 po prawej



Strefa 19

(na zdjęciu dłoń prawa)



Strefa 94

(na zdjęciu noga prawa)




Strefa 50

(na zdjęciu ucho prawe)

Kolejne dni:

Dzień 7: strefa 89 + strefa 63 po lewej

Dzień 8: strefa 89 + strefa 63 po prawej

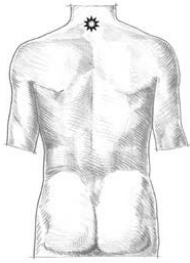

Strefa 89

(na zdjęciu tył pleców)
okolice szyi




Strefa 63

(na zdjęciu lewa ręka)

Kolejne dni:

Dzień 9: strefa 55 po lewej + strefa 35 po prawej + strefa 43 po lewej

Dzień 10: strefa 55 po prawej + strefa 35 po lewej + strefa 43 po prawej

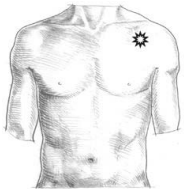

Strefa 55



Strefa 35



Strefa 43

(na zdjęciu prawy bark) (na zdjęciu lewa ręka) (na zdjęciu prawa noga)


Kolejne dni:

Dzień 11: strefa 19 po lewej + strefa 73 po prawej + punkt VG15


Dzień 12: strefa 19 po prawej + strefa 73 po lewej + punkt VG15



Strefa 19

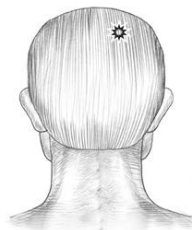

Strefa 73

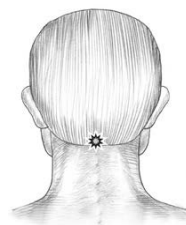

Strefa VG15

(na zdjęciu prawa dłoń) (na zdjęciu tył głowy) (na zdjęciu tył głowy)

Koniec działań dla osób powyżej 65 lat 😊

Działanie na czakry 😊

Program „Energia” pozwala również przeprowadzić diagnostykę PE (**pole elektromagnetyczne**) człowieka i odkryć strefy działające niewłaściwie, a następnie działając na nie przewrócić je do równowagi. Diagnostowanie należy przeprowadzać w spokoju, rozluźnieniu i ciszy, uważnie przysłuchując się odpowiedziom PE 😊



Kolejność postępowania w diagnostyce PE ciała fizycznego jest następująca:

Należy usiąść wygodnie, uspokoić się (wyciszyć) i spokojnie rozpocząć prawą ręką działanie na czakrę na lewej dłoni (7), wykonując 2 kręgi w ciągu 1 minuty – czas trwania 5 minut - razem 10 kręgów 😊


Uważnie rejestrujemy odczucia w naszym ciele. Nie od razu, lecz stopniowo pojawią się odczuwalne w nim symptomy. To może być kłucie, swędzenie, łaskotanie lub pobołowanie w jednym miejscu lub kilku. Należy wybrać najbardziej dokuczliwy symptom i najdokładniej określić jego miejsce. Następnie zbliżyć aparat do danego miejsca, włączyć go na nowo i rozpocząć działanie programem - „Energia”.

W ciągu **1** seansu można pracować tylko nad tym jednym miejscem 😊

Następnego dnia powtórzyć dokładnie całą procedurę. PE samo określa kolejność działania na miejsca wymagające przywrócenia harmonii. Czas działania na jedną strefę 10 minut 😊

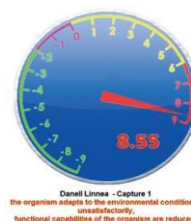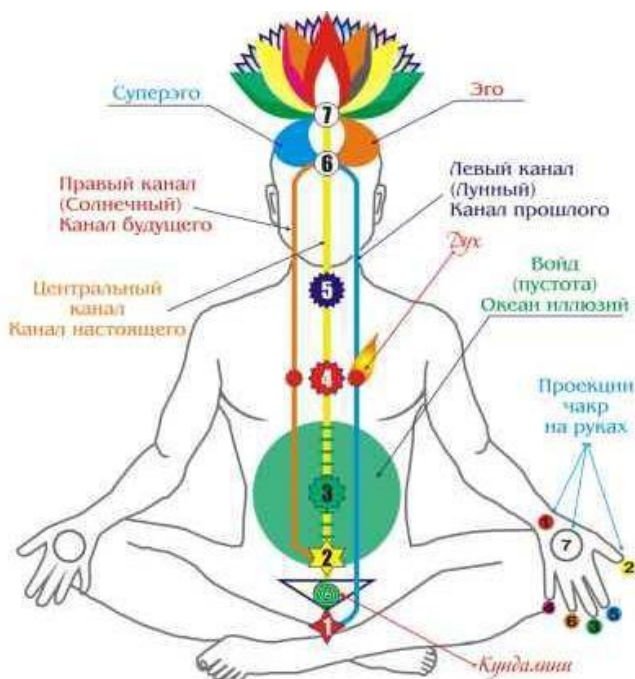

Образ 1

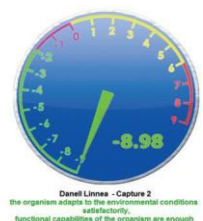

Образ 2

Na **obrazie 1** widzimy zmęczoną kobietę. Widać u niej braki w aurze w okolicach lewej nerki i płuc oraz obniżoną odporność. Po wykonaniu diagnostyki określono problematyczne miejsca 😊

Następnie przeprowadzono programem 3 – „**Energia**” (10minut) działanie w okolicy lewej nerki i kolejne 10 minut działano w okolicach płuc.

Obraz 2 przedstawia PE tej osoby, po wykonaniu działań programem 3 – „**Energia**”.

Obserwujemy podwyższoną energetykę w okolicach nerki i płuc oraz przywrócenie odporności 😊

Programem Energia możemy też działać na odblokowanie ludzkich 7 czakr. Od czakry dolnej (pierwszej), poprzez kolejne, aż do czakry ostatniej górnej (siódmej). Czas działania: 2 – 3 minuty na każdą z czakr. Częstotliwość 1 na tydzień 😊

Inne działania programu „**Energia**” 😊

Programem 3 – „**Energia**”, urządzenia Biotrem SB możemy przeprowadzić jeszcze inne działania, w tym bardzo ważnej diagnostyki miejsc ciała, które są w słabej kondycji lub są chore. Polega to na 2 minutowym działaniu na każdy z opuszków palców zaczynając od najmniejszego palca lewej stopy, w kierunku najmniejszego palca prawej stopy (na każdy po 2 minuty) i od razu od najmniejszego palca prawej dłoni w kierunku najmniejszego palca w lewej dłoni (też na każdy po 2 minuty). Razem 20 minut. W trakcie takiego działania odzywają się w nas narządy o słabej kondycji fizycznej i energetycznej. Możemy zapisać sobie, co nam dolegało, na którym palcu i działać programem Energia na ten palec oraz na chore miejsce w naszym ciele, które się odezwało 😊



Początek

od lewego palca lewej stopy do
małego palca prawej stopy



Dalej

od małego palca prawej dłoni do
małego palca lewej dłoni

Uwaga: Proszę się nie sugerować punktami na w/w zamieszczonych

rysunkach, chodzi o opuszki wszystkich omawianych palców 😊

